



CARDIOVIT AT-2 plus

DOS EQUIPOS EN UNO

ECG y espirometría en uno:

Hasta hace poco, se subestimaba seriamente la importancia de las pruebas de espirometría para el diagnóstico precoz de patologías pulmonares obstructivas crónicas y de determinadas enfermedades cardiacas. No obstante, el número cada vez mayor de pacientes que sufren deficiencias de la función pulmonar muestra claramente que es esencial un examen frecuente de la función pulmonar.

SCHILLER fue el primer fabricante que combinó las dos pruebas más comunes de función pulmonar y cardiaca en un solo equipo – el CARDIOVIT AT-2 plus con función de espirometría y ECG.



SCHILLER

The Art of Diagnostics

CARDIOVIT AT-2 plus

DOS EQUIPOS EN UNO!

Manejo sencillo – doble beneficio:


- La ventaja de dos pruebas en un solo equipo
- Ambas funciones se controlan desde el mismo equipo
- Gracias a su peso reducido y a su tamaño compacto, el CARDIOVIT AT-2 plus puede transportarse fácilmente
- El equipo se distingue por su absoluta fiabilidad
- Mediante la impresora de alta resolución integrada, puede obtener informes en formato A4, de calidad excepcional y listos para archivar
- Se obtienen copias impresas, que incluyen el diagnóstico y los valores de medición, en menos de 20 segundos
- Batería integrada
- Pueden obtenerse impresiones ampliadas y número ilimitado de copias
- El teclado alfanumérico, resistente al agua, con teclas de función, permite la introducción rápida y sencilla de los datos del paciente
- Almacenamiento de más de 60 registros (opcional)
- Los datos pueden transferirse a un PC



Tecnología ECG reconocida Internacionalmente:

- Impresión de 6 canales en tiempo real a 5, 25 ó 50 mm/s
- Impresión automática de 6 /12 canales en una o dos páginas
- Programa de medición e interpretación rápido y fiable basado en PC para ECG de adultos y pediátricos
- No es necesario repetir los registros de ECG, ya que la calidad de las formas de onda se optimiza gracias a los filtros de suavizado y línea base de SCHILLER
- Ahorra tiempo y papel monitorizando las 12 derivaciones en la pantalla de 3 canales integrada



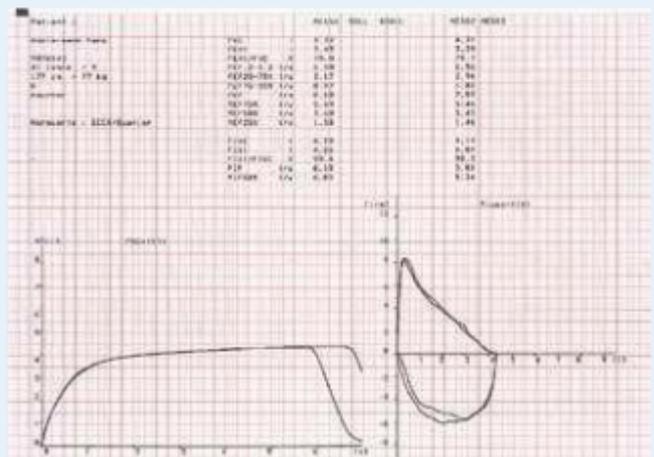

Cumplimiento de las normas de espirometría más estrictas:

- Gracias al sensor SP-250 con su boquilla desechable exclusiva, se elimina el riesgo de contaminación cruzada
- Sensor ligero y de tamaño reducido
- Calibración rápida y sencilla
- Pruebas de función pulmonar inspiratoria y espiratoria: FVC, SVC, MV, MVV, así como pruebas pre/post medicación
- Pueden seleccionarse diversas tablas de valores de normas según sea necesario
- Soporte visual gracias a los gráficos en tiempo real y a la presentación de los valores medidos en la pantalla

